



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 7691 Aparat Masaj inSPORTline C21



Nota: Compania noastra isi rezerva drepturile de a schimba aparenta sau caracteristicile produsului fara nici o notificare prealabila.

CONTINUT

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
CONDITI DE FUNCTIONARE	3
AVERTIZARE	3
MENTENANTA.....	3
CONSTRUCTIE	3
EFFECTELE MASAJULUI.....	4
CAPURI DE MASAJ RECOMANDATE.....	4
SPECIFICATII PRODUS.....	5
PROTECTIA MEDIULUI.....	5

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Nu folositi produsul daca reseaua electrica, voltaju sau priza nu este potrivita pentru acest produs sau daca stecherul sau priza este deteriorata.
- Nu deteriorati cablul de alimentare.
- Folositi produsul intr-un loc sigur si doar pentru scopul pentru care a fost creat.
- Aveti grija ca acest produs sa nu intre in contact cu ulei sau substante inflamabile.
- Nu curatati acest produs cu agenti chimici agresivi.
- Nu il folositi daca nu functioneaza corespunzator. Opriti-l daca simtiti miros de ars.
- Fiti foarte atent cand il folositi cu copii in preajma.
- Nu este recomandat sa folositi produsul mai mult de 15 minute.

CONDITI DE FUNCTIONARE

- Nu expuneti produsul la lumina directa a soarelui pentru perioade prea mari de timp.
- Acest produs nu este potrivit pentru copii, persoane care sufera de boli mentale sau persoane in varsta.

AVERTIZARE

- Dupa ce ati terminat de utilizat produsul deconectati-l de la curent si depozitati-l intr-un loc sigur.
- Nu incercati sa modificati acest produs.


MENTENANTA

- Deconectati aparatul de la curent inainte de a incepe orice operatiune de mentenanta.
- Curatati stecherul de praf sau mizerie.
- Verificati periodic produsul. Nu lasati produsul cu stecherul in priza nesupravegheat.

CONSTRUCTIE

Acest produs are inclus ca accesorii 3 capuri de masaj interschimbabile pentru a masa eficient diferite parti ale corpului.



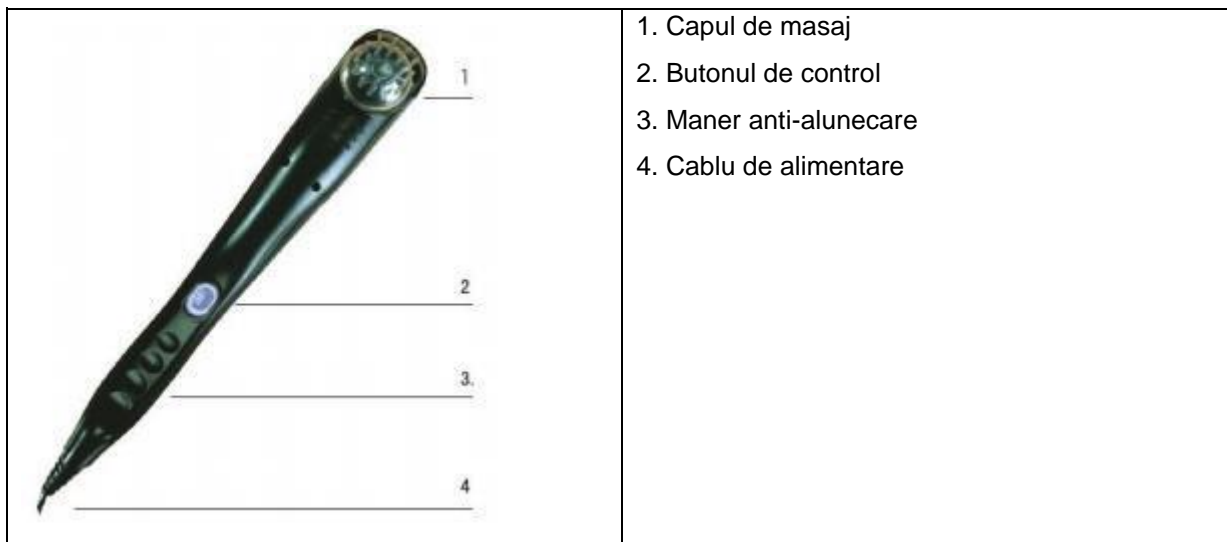

EFFECTELE MASAJULUI

- Se pot masa diferite parti ale corpului pentru a stimula functionarea diferitelor organe sau muschi.
- Masajul poate imbunatati circulatia sangelui si ajuta sistemul imunitar.
- Sunt disponibile 3 capuri diferite de masaj.
- Puteti alege 3 tipuri de vibratii.
- Manerul este facut din materiale anti-alunecare, este confortabil si usor de folosit.
- Control usor al aparatului cu un buton face acest produs de masaj unic.

CAPURI DE MASAJ RECOMANDATE



SPECIFICATII PRODUS

NUME: Aparat de masaj

MODEL: C21

VOLTAJ INTRARE: AC110-120V / 60Hz

AC220-240V / 50Hz

PUTERE: 15W

CATEGORIA DE SIGURANTA: I

PROTECTIA MEDIULUI

Dupa expirarea duratei de viata a produsului sau daca repararea este posibila dar nerentabila, aruncati conform legilor locale si ecologic in cel mai apropiat loc de colectare de deseuri.

Prin eliminarea corespunzatoare veti proteja mediul si sursele naturale. Mai mult, puteti ajuta la protejarea sanatatii umane. Daca nu sunteti sigur de modul de arucare corecta, cereti sfatul autoritatilor locale pentru a evita incalcarea legii sau sanctiuni.

Nu puneti bateriile printre deseurile menajere, ci aruncati in locuri special amenajate pentru ele.