



# inSPORTline

## MANUAL DE UTILIZARE – RO IN 11119 Mini Aparat Masaj inSPORTline C27




## **CONTINUT**

DESPRE PRODUS .....	3
CONTINUT CUTIE .....	3
INSTALAREA BATERIILOR.....	3
FUNCTIONARE .....	4
MENTENANTA.....	4
TRANSPORTARE SI DEPOZITARE .....	4
DEPANARE.....	4
SPECIFICATII PRODUS.....	4

**Va multumim ca ati ales unul din produsele noastre. Si inainte de al utiliza va recomandam sa cititi cu atentie acest manual de instructiuni si sa il pastrati pentru referinte viitoare.**


## DESPRE PRODUS

- Bucurativa de un masaj relaxant si fara effort ori unde si la orice ora multumita acestui mini aparat de masaj.
- Designul sau ergonomic si cele 3 capete de masaj permit un masaj corect al intregului corp. De asemenea miscarile sale vibrante sunt benefice pentru circulatia sanguina si ajuta la relaxarea muschilor oferind o senzatie de usurare. Aparatul de masaj combinat cu o dieta corespunzatoare si exercitii regulate te pot ajuta sa reduci nivelul de grasime si sa obti corpul dorit.
- O sesiune de masaj poate dura intre 15 minute sau 1 ora. De obicei o sesiune de 15 minute este limitata la coate si spate, dar daca aveți destul timp va recomandam un masaj al intregului corp de la cap pana la picioare, efectuat de un maseur profesional, in special daca aveți dureri, dar daca nu aveți dureri este recomandat pentru a va relaxa.

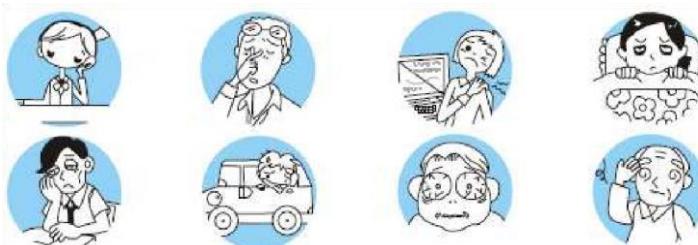


- Acest aparat are un design bine gândit bazat pe linile de conțur ale corpului cu 3 capete de masaj și un motor performant controlat de un chip pentru a genera un masaj adecvat.
- **Acest dispozitiv are o structura rezistenta la apa (waterproof).**

## CONTINUT CUTIE

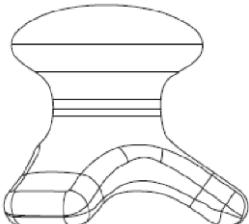		
1. Aparatul de masaj	2. Baterii (1.5V x 3 AAA)	3. Manual de utilizare

## INSTALAREA BATERIILOR

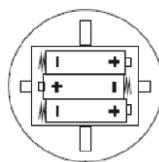

1. Deschideți capacul de la aparat în funcție de sagetele de orientare și introduceți 3 baterii AAA în acesta.
2. Inchideți capacul de la baterie.
  - \* Asigurăvă că bateriile sunt poziționate corect cu plus și minus și dacă capacul de la baterii este închis corect.
  - \* Vedeți poza de mai sus pentru poziționarea corectă a bateriilor.

## FUNCTIONARE

1. Puneti cele 3 capete de masaj ale aparatului pe partea de corp care doriti sa o masati si apasati partea de sus a aparatului cu un pic de forta si acesta va incepe sa mearga.
2. Pentru a opri aparatul nu mai aplicati presiune pe partea de sus a acestuia si acesta se va opri si il puteti lua de pe corp.

## MENTENANTA

- Puneti un alcool sanitar pe o carpa si stergeti aparatul de murdarie sau praf.
- Depozitati aparatul intr-un loc sigur dupa utilizare. Nu depozitati nimic greu pe aparat.
- Daca aparatul nu functioneaza adresativa uni tehnician profesionist pentru reparatii. Nu dezasamblati aparatul dvs. fara permisiune.

## TRANSPORTARE SI DEPOZITARE

**Temperatura ambientala:** 5°C – 40°C

**Umiditate relativa:** nu mai mult de 80%, camera bine ventilata.

**Presiune atmosferica:** 860hpa – 1060hpa

## DEPANARE

PROBLEMA	CAUZA	SOLUTIA
Nu merge	Baterii descarcate? Directia de pozitionare a bateriilor puls si minus nu este corecta?	Schimbati bateriile. Puneti bateriile in pozitia corecta cu plus si minus.
Forta mica de masaj	Baterii descarcate?	Schimbati bateriile.

## SPECIFICATII PRODUS

**Dimensiuni:** (L)105.6mm x (l)96.4mm x (l)89.8mm

**Baterii:** 3xAAA

**Greutate neta:** 204.5g

**Materiale:** ABS

**Alimentare:** 1.3 VA

**Rezistenta la apa (waterproof):** IP67