



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 18009 Perna de Masaj inSPORTline Metabo



CONTINUT

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
FUNCTII	3
INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE	3
Pentru uz acasa	3
Pentru uz in masina	3
SPECIFICATII PRODUS.....	3

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Pentru uz acasa. Daca vreti sa folositi perna in masina aveti nevoie de un adaptator special.
- Nu mai folositi produsul daca acesta nu merge cum trebuie. Contactati vanzatorul pentru reparatie.
- Nu il folositi mai mult de o sesiune de 15 minute.
- Nu scoateti cablul de alimentare.
- Cand cablul de alimentare este deteriorat, contactati vanzatorul pentru al schimba.
- Nu folositi perna in locuri cu umezeala mare cum ar fi baie sau langa o sursa de apa. Utilizare produsului in locuri cu umezeala mare poate cauza electrocutare.
- Nu este o jucarie. Tineti departe de copii.
- Persoanele care sufera de: probleme cu inima, tumori, femei insarcinate, au malformatie la coloanal sau au pacemaker(stimulator cardiac) nu trebuie sa foloseasca acest produs.

FUNCTII

Acest produs cu design inovator cu patru capete de masaj incalzite poate masa profund musculatura, accelera circulatia sangelui sau doar sa va ajute sa va relaxati. Cu functia de incalzire cu infrarosu poate produce un efect de incalzire rapid. Timer de 20 de minute pentru o sesiune de masaj.

- Mod unic de reglare a vitezei
- Protectie la supraincalzire
- Functie de masaj cu caldura


INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE

Pentru uz acasa

Conectati adaptatorul la perna si dupa conectati la priza.

Pentru uz in masina

Conectati adaptatorul la perna si dupa conectati la priza de bricheta de la masina.

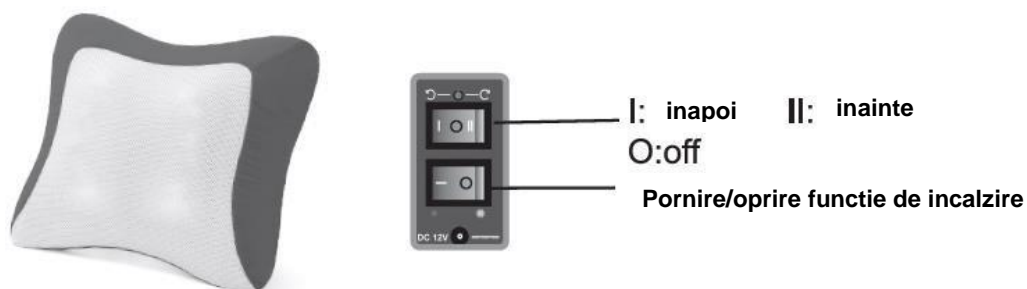

SPECIFICATII PRODUS

Tensiune nominala	AC100-240 V / DC 12V
Frecventa nominala	50-60 Hz
Putere nominala	30W
Timp nominal	15 minute

