



MANUAL DE UTILIZARE – RO
IN 7322 Aparat de Masaj inSPORTline C02



CONTINUT

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA.....	3
FUNCTII SI CARACTERISTICI.....	3
UZ.....	4
DESCRIERE PRODUS.....	4
PROBLEME COMUNE	4
SPECIFICATII	5
PROTECTIA MEDIULUI.....	5

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Nu conectati produsul la o sursa de curent care nu corespunde cu ceea ce este specificat pe acesta.
- Tineti produsul departe de apa acesta poate fi deteriorate de aceasta.
- Nu il folositi in medii cu umezeala mare de exemplu in baie.
- Tineti produsul departe de orice sursa de caldura sau lumina directa a soarelui.
- Nu folositi aparatul daca acesta are capetele de masaj detriorate.
- Inlocuiti imediat partile deteriorate.
- Inainte de a baga aparatul in priza asigurativa ca acesta este oprit.
- Nu bagati produsul in priza sau sa puneti mana pe cablul de alimentare daca aveti mainile ude.
- Dupa fiecare utilizare opriti aparatul si deconectati de la priza.
- Daca cablul de alimentare, stecherul sau priza sunt deteriorate nu incercati sa le reparati singuri contactati o persoana abilitata.
- Dupa o utilizare lunga aparatul se poate incalzii. Nu este recomandat sa il folositi pentru sesiuni lungi de masaj daca sunteti sensibil la caldura.
- Aparatul are senzori de temperatura integrati care il opresc automat daca acesta devine prea cald. Puteti sa va continuati masajul dupa ce acesta sa racit.
- Nu folositi aparatul mai mult de 20 de minute.
- Copii sub 14 ani si persoanele care sufera de probleme mentale nu trebuie sa foloseasca aparatul fara supravegherea unui adult.
- La femeile gravide nu le este recomandat sa foloseasca acest aparat




FUNCTII SI CARACTERISTICI

- Va puteti bucura de un masaj cu vibrati si caldura in acelasi timp.
- Pentru un masaj usor si eficient aparatul este echipat cu un maner mare si ergonomic.
- Comenzi simple pentru un control simplu si usor.
- Posibilitatea de a folosi doua capete de masaj diferite.
- Design modern usor de folosit si sigur.



UZ

- Inainte de a conecta dispozitivul la priza asigurativa ca acesta este oprit.
- Puneti butonul in pozitia I (masaj) sau pozitia II (masaj si caldura).
- Ajustati intensitatea cu butonul de reglare.
- Utilizarea aparatului in mod corect va rezulta un masaj placut si relaxant.
- Miscati capul de masaj pe corp. Nu lasati capul de masaj pe acelasi loc mai mult de 3 minute. Focusativa pe zonele problematice ale corpului si dati timp sa actioneze.
- Folositi capul de masaj potrivit: sunt 22 types are available – finger massage or pressure and toning massage.
- Adjust the vibration to your current needs.

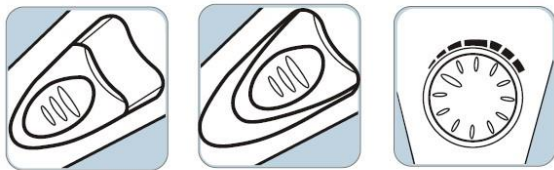


Off

Masaj si caldura

Viteza

DESCRIERE PRODUS

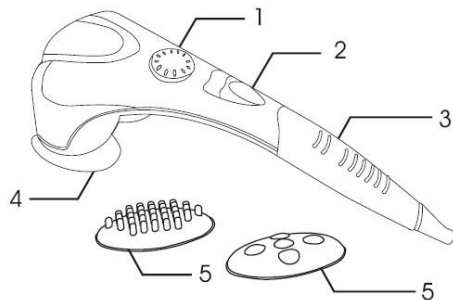

1. Buton ajustare viteza 2. Buton on/off
3. Maner ergonomic 4. Capuri de masaj cu caldura
5. Capuri de masaj

PROBLEME COMUNE

Probleme	Cauze	Solutii
Motorul nu merge	Cablul de alimentare nu este bine conectat	Verificati conexiune cablului de alimentare
	Butonul on/off nu este in pozitia corecta	Verificati butonul on/off
Motorul se tot opreste	Protectie la supraincalzire	Opriti aparatul pentru 5 minute

SPECIFICATII

Model: C02

Nume: Aparat de masaj

Configurare: 02

Voltaj de intrare: 220 - 240 V, 50Hz/60Hz

110 - 120 V, 60 Hz

Putere: 28W

PROTECTIA MEDIULUI

Dupa expirarea duratei de viata a produsului sau daca repararea este posibila dar nerentabila, aruncati conform legilor locale si ecologic in cel mai apropiat loc de colectare de deseuri.

Prin eliminarea corespunzatoare veti proteja mediul si sursele naturale. Mai mult, puteti ajuta la protejarea sanatatii umane. Daca nu sunteti sigur de modul de arucare corecta, cereti sfatul autoritatilor locale pentru a evita incalcarea legii sau sanctiuni.

Nu puneti bateriile printre deseurile menajere, ci aruncati-le in locuri special amenajate pentru ele.