




MANUAL DE UTILIZARE –RO
IN 24990 Masca Fata pentru Terapie Luminoasa cu
LED inSPORTline Esgrima

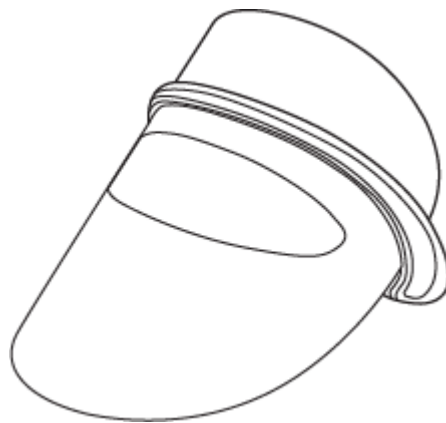


CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA	3
DESCRIERE PRODUS	3
UTILIZARE	3
TERAPIE LUMINOASA	4
SPECIFICATII.....	5
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	5

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Cititi manualul inainte de utilizarea produsului si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
- Nu folositi produsul daca sunteti insarcinata.
- Nu folositi produsul daca aveti epilepsie.
- Nu folositi produsul daca luati medicamente pentru tiroida.
- Dupa utilizare, stergeti produsul cu o carpa de bumbac. Curatati produsul cu blandete pentru a impiedica deformarea si deteriorarea.
- Nu folositi solutii de curatare agresive.
- Cand nu-l folositi, puneti produsul intr-un spatiu uscat, ferit de soare.
- Nu reparati, modificati, utilizati produsul in alt mod decat cel descries in manual. Feriti masca de temperature extreme.


DESCRIERE PRODUS

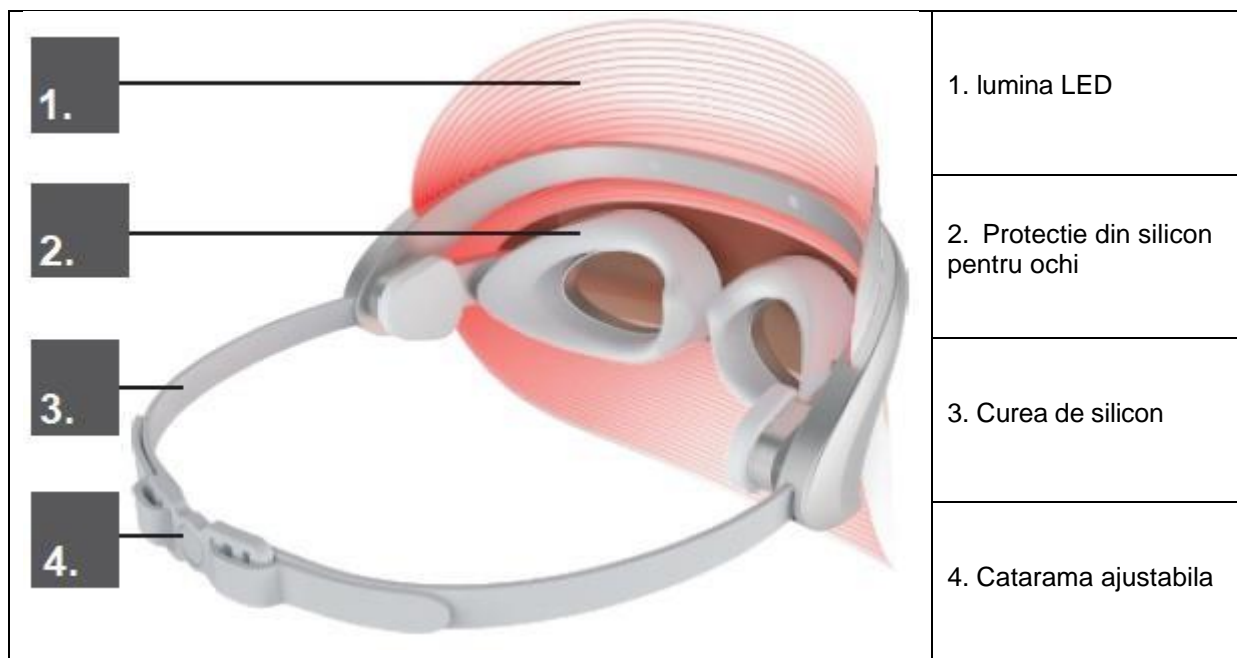

UTILIZARE

- Spalati-va pe fata si stergeti-va. Ajustati cureaua de silicon.
- Conectați cablul USB la un adaptor de 5V 1A sau mai mult pentru pornire.
- Pentru un efect mai bun, puteti folosi o masca de fata sau alte produse cosmetice destinate pielii (lotiune, uleiuri).
- Purtati masca de fata timp de 10 - 20 de minute. Utilizatorul poate folosi masca pana la 30 de minute dupa cateva luni de utilizare regulata.

1. Apasati butonul de pornire (2.) timp de 1 secunda. Puteti seta temperature, frecventa vibratiilor, terapia LED.
 2. Tineti apasat butonul de pornire (2.) timp de 1 secunda pentru oprire.
 3. Apasati scurt butonul de pornire (2.) pentru a seta vibratiile.
 4. Apasati butonul pentru cronometru (3.) pentru a alege durata - 10 min, 15 min, 20 min si 30min.
 5. Tineti apasat butonul pentru cronometru (3.) timp de 1 secunda pentru a active terapia cu LED.
- Exista 7 culori disponibile din care sa alegeti.

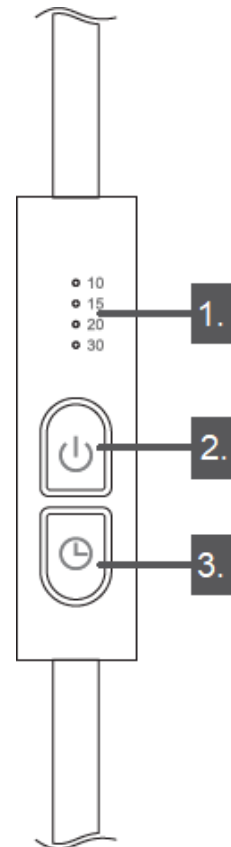

TERAPIE LUMINOASA

ROSU

Cresterea fluxului sanguin si a productiei de colagen. Ajuta la repararea tesuturilor (inlocuirea celulelor moarte ale pielii cu altele noi) si la reducerea porilor.

VERDE

Ajuta la echilibrarea culorii pigmentului, accelereaza regenerarea pielii si reduce sebumul.

ALBASTRU

Calmant, antiinflamator, distruge bacteriile pielii

PORTOCALIU

Energizeaza pielea, ajuta la reducerea ridurilor, echilibreaza culoarea pigmentului si netezeste pielea.

Violet

Previne acneea

Albastru deschis

Ajuta la cresterea energiei celulare si la imbunatatirea metabolismului.


Alb

Ajuta la imbunatatirea fermitatii pielii si a metabolismului tesuturilor.

Ingrijirea ochilor

Temperatura de 40 ° C reduce uscaciunea si oboseala ochilor. Amelioreaza cearcanele si pungile de sub ochi.

SPECIFICATII

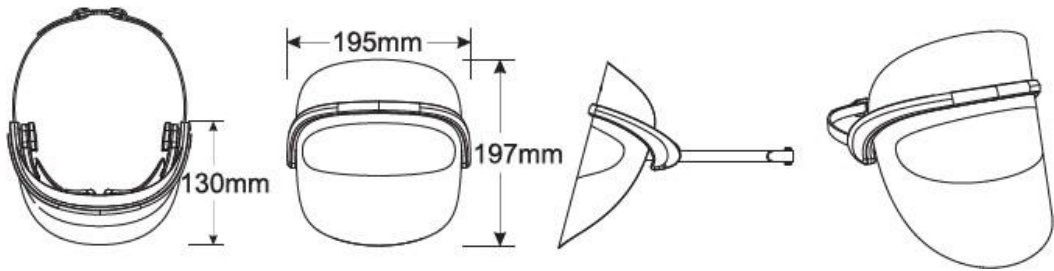Model: IF-0802	Durata de utilizare: 10-30 min
Tensiune: 9 W	Tensiune de intrare: 5 V - 2 A
	

PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Dupa expirarea duratei de utilizare a produsului sau daca eventuala reparatie este neeconomica, duceti-l conform legilor locale si ecologice in cel mai apropiat centru de reciclare.

Prin eliminarea corecta veti proteja mediul si resursele naturale. In plus, puteti contribui la protejarea sanatatii umane. Daca nu sunteti sigur de eliminarea corecta, cereti ajutorul autoritatilor locale, pentru a evita incalcarea legii sau sanctiunile.

Nu aruncati bateriile printre deseurile menajere, ci duceti-le in centre de reciclare speciale.