



**MANUAL DE UTILIZARE –RO**  
**IN 23295 Lampa cu infrarosu inSPORTline**  
**Dewalo**



## CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA .....	3
UTILIZARE .....	3
INTENSITATE .....	3
CRONOMETRU .....	3
SPECIFICATII.....	4
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	4

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Cititi manualul inainte de utilizare si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
- Nu utilizati produsul in timpul baii sau in incaperi cu umiditate ridicata (bazine de inot, saune, etc.)
- Nu scufundati produsul in apa.
- Nu folositi produsul daca cablul de alimentare este deteriorat.
- Nu trageți de cablul de alimentare.
- Nu acoperiti niciodata lampa in timpul utilizarii si nu o folositi atunci cand sunteti obosit.
- Daca temperatura setata este prea inalta, puteti sa va ardeti.
- Nu va uitati direct in lumina.
- Nu utilizati pentru zona genituala.
- Nu utilizati in timpul somnului sau daca nu sunteti complet uscat.
- Nu utilizati produsul pentru mai mult de 30 minute consecutiv.
- Nu reparati/ modificati produsul in niciun fel.
- Evitati lovirea, scaparea pe jos a lampii.
- **ATENIE:** Acest produs nu este indicat pentru femei insarcinate, copii, persoane care au tumori, sangerari, probleme de coagulare a sangelui, arsuri, probleme ale pielii sau probleme cu circulatia sangelui.
- **ATENIE:** Produsul nu este potrivit pentru persoanele sensibile la lumina, caldura, sau cu piele sensibila.

## UTILIZARE

Introduceti stecherul in priza. Setati intensitatea la cel mai scazut nivel.

Asezati lampa astfel incat lumina sa bata pe zona dorita si masati cu miscari circulare. Daca temperatura este prea ridicata, mariti distanta dintre corp si bec.

In caz de iritatii, roseata a pielii, arsuri, umflaturi, opriti imediat utilizarea produsului si consultati un medic.

Daca folositi uleiuri sau creme, acoperiti zona cu un servetel de hartie inainte de utilizare. Nu utilizati lampa in aceeasi zona pentru mai mult de 5 minute.

Dupa utilizare, lasati lampa sa se raceasca si apoi scoateti-o din priza. Apoi stergeti lampa cu o carpa umeda si lasati-o sa se usuce, inainte de a o folosi din nou.

## INTENSITATE

Lampa are 4 niveluri de intensitate: 1 – 50%, 2 – 70%, 3 – 80%, 4 – 100%


Cand o aprindeti, lampa porneste de la primul nivel. Daca apasati in mod repetat butonul start, intensitatea luminoasa creste pana la maxim, apoi lampa se stinge.

## CRONOMETRU

Cronometrul are 3 niveluri: 1 - 10 min, 2 - 30 min, 3 - 40 min.

Porniti lampa si apasati butonul cronometrului pentru a seta timpul. Valoarea implicita dupa pornire este 1 (10 min). Cand timpul s-a scurs, lampa se inchide automat. Puteti sa opriti lampa si manual, folosind butonul start.

## SPECIFICATII

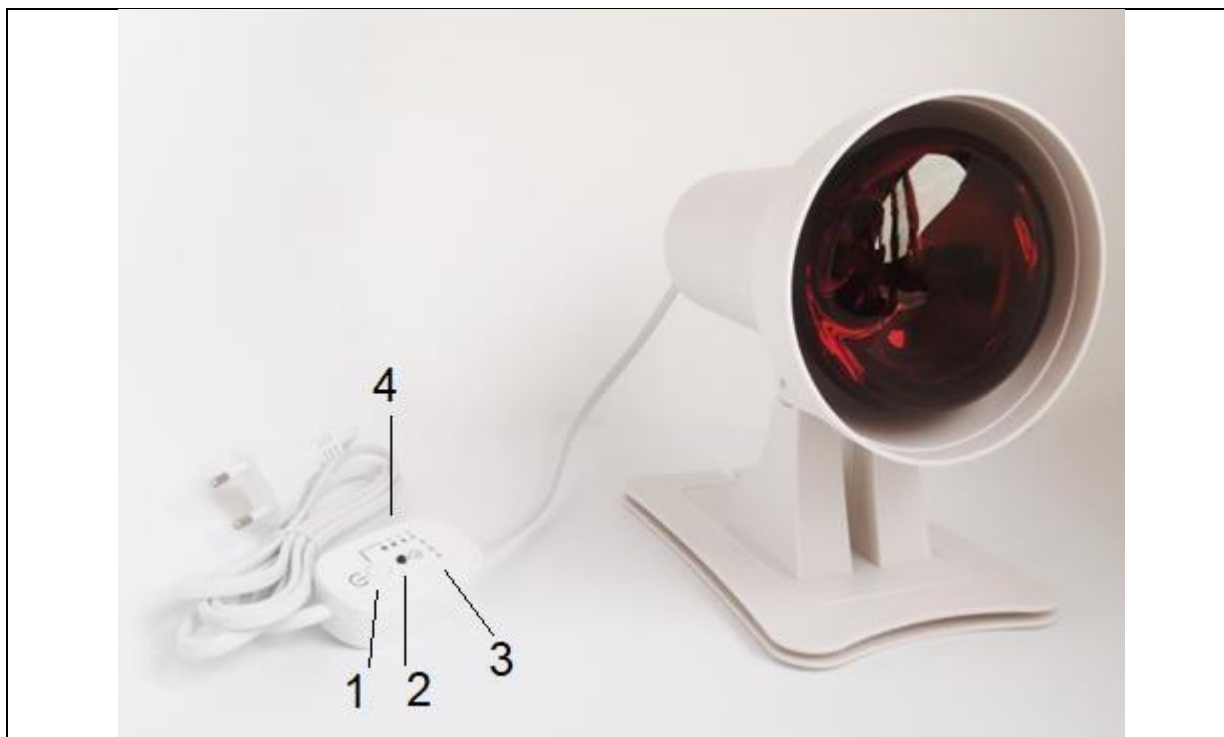

1.	Buton pornire/oprire si setare intensitate	3.	Indicator timp
2.	Buton cronometru	4.	Indicator intensitate

Tensiune	230V 50Hz/60Hz
Putere	150 W
Tip bec	R95
Filet bec	E27
Lungime de unda	700 – 1400 nm

## PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Dupa expirarea duratei de utilizare a produsului sau daca eventuala reparatie este neeconomica, duceti-l conform legilor locale si ecologice in cel mai apropiat centru de reciclare. Prin eliminarea corecta veti proteja mediul si resursele naturale. In plus, puteti contribui la protejarea sanatatii umane. Daca nu sunteti sigur de eliminarea corecta, cereti ajutorul autoritatilor locale, pentru a evita incalcarea legii sau sanctiunile. Nu aruncati bateriile printre deseurile menajere, ci duceti-le in centre de reciclare speciale.