



**MANUAL DE UTILIZARE - RO**

**IN 23084 Aparat de masaj radiofrecventa pentru ochi  
inSPORTline Eyewish**




## CUPRINS

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA .....	3
DESCRIERE PRODUS .....	3
UTILIZARE .....	4
MENTENANTA.....	5
INCARCARE.....	5
SPECIFICATII.....	5
PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR.....	5

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- Cititi intregul manual inainte de utilizare si pastrati-l pentru referinte ulterioare.
- Inlaturati toate obiectele metalice si bijuteriile de pe corp inainte de utilizarea produsului.
- Nu utilizati produsul in timpul incarcarii.
- Nu modificati si nu reparati aparatul, daca acesta nu functioneaza corect, contactati departamentul de service.
- Nu este indicat persoanelor sensibile la caldura, alergii la metal sau piele extrasensibila.
- Nu este potrivit pentru persoane: gravide; copii; care sufera de epilepsie, tumori, inflamatii; persoanele care folosesc un stimulator cardiac; persoane sensibile la caldura, vibratii; persoanele care sufera de eczeme sau boli dermatologice. Contactati medicul pentru detalii suplimentare.

## DESCRIERE PRODUS

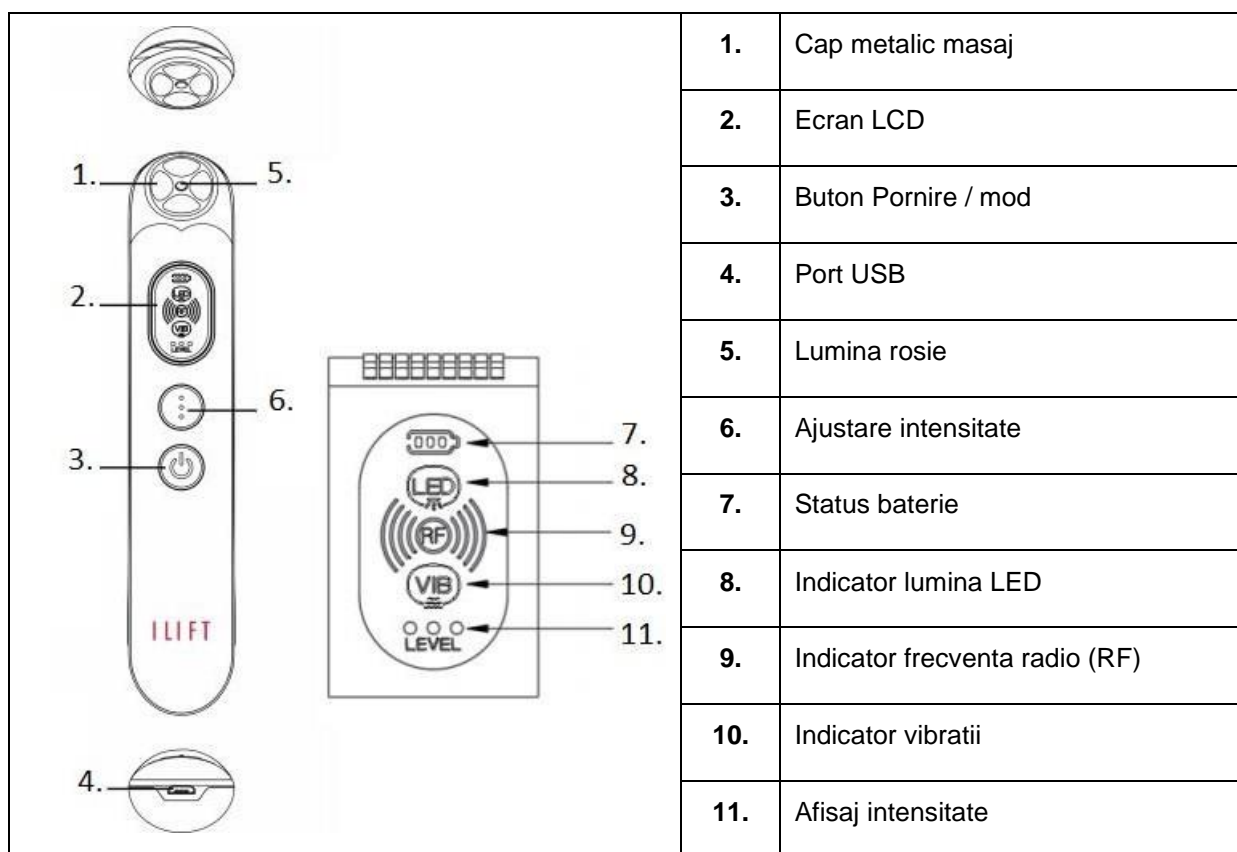

## UTILIZARE


Tineti apasat butonul de pornire pentru a porni aparatul. Apasati inca o data pentru a schimba modul.

1. Frecventa radio + lumina rosie + vibratii
2. Frecventa radio + lumina rosie
3. Frecventa radio + vibratii
4. Frecventa radio

Setarea intensitatii este disponibila doar pentru frecventa radio.




Aplicati o cantitate suficienta de crema pe fata.

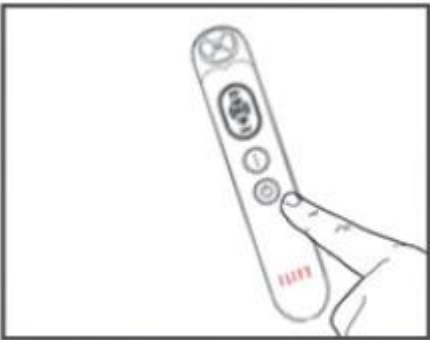

Tineti apasat butonul de pornire, apoi apasati inca o data pentru a seta modul. Apasati butonul de ajustare a intensitatii daca doriti sa o modificati.



Masati bland zona din jurul ochilor, conform imaginii alaturate.

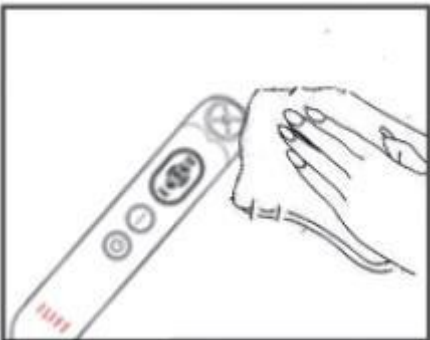

Dupa utilizare, curatati capul de masaj cu un prosop sau carpa curata.

## MENTENANTA

- Aplicati crema pe fata uniform si intr-o cantitate corespunzatoare, pentru ca aceasta sa nu se adune excesiv pe ten. Dupa utilizare, curatati fata cu un prosop uscat sau un servetel.
- Protejati corpul aparatului de contactul cu apa.
- Nu folositi agenti de curatare agresivi.
- Depozitati intr-un loc uscat si cu umbra.
- Nu folositi produsul daca este deteriorat.
- Protejati produsul de socuri si cazaturi.

## INCARCARE

- Daca bateria este consumata, incarcati aparatul.
- Indicatorul bateriei va palpai in timpul incarcarii. Simbolul se opreste din palpai atunci cand are loc incarcarea completa.
- Daca planuiti sa depozitati produsul o perioada lunga de timp, incarcati regulat bateria.
- Scoateti incarcatorul din priza dupa finalizarea incarcarii.

## SPECIFICATII

<b>Denumire:</b>	Aparat de masaj radiofrecventa pentru ochi		
<b>Model:</b>	IF-1208	<b>Durata functionare:</b>	>30 min
<b>Greutate:</b>	54g	<b>Radio frecventa:</b>	400kHz
<b>Dimensiuni:</b>	149,9x28x22 mm	<b>Intrare:</b>	DC5V/1A
<b>Frecventa vibratie:</b>	12000 RPM	<b>Baterie:</b>	500 mAh
<b>Durata incarcare:</b>	3 ore		

## PROTEJAREA MEDIULUI INCONJURATOR

Dupa expirarea duratei de utilizare a produsului sau daca o posibila reparatie nu este economica, eliminati-l in conformitate cu legile locale și ecologice, in cel mai apropiat centru de colectare. Prin eliminarea corespunzatoare, veti proteja mediul si resursele naturale. In plus, puteti ajuta la protejarea sanatatii umane. Daca nu sunteti sigur de eliminarea corecta, cereti indrumari de la autoritatile locale, pentru evitarea incalcarii legii si a sanctiunilor.

Nu aruncati bateriile printre deseurile menajere, ci duceti-le in spatii special destinate reciclarii.