



**MANUAL DE UTILIZARE – RO**  
**IN 18010 Aparat masaj picioare inSPORTline Otterchill**



## CUPRINS

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA ..... | 3 |
| UTILIZARE .....                 | 3 |
| INLOCUIRE BATERII .....         | 4 |
| UTILIZARE ALTERNATIVA.....      | 4 |

## INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA

- ☐ Cititi manualul cu atentie.
- ☐ Scoateti aparatul din priza, dupa fiecare utilizare.
- ☐ In cazul in care dispozitivul a venit in contact cu apa, nu il atingeti, scoateti-l din priza imediat.
- ☐ Nu folositi aparatul in timpul baiilor sau dusurilor.
- ☐ Nu depozitati aparatul in incaperi cu umiditate mare sau in apropierea apei.
- ☐ Atentie, nu scapati aparatul in apa!
- ☐ Nu lasati produsul nesupravegheat, atunci cand este in priza.
- ☐ Nu asezati paturi sau perne sub sau pe aparat. Incalzirea excesiva poate cauza incendii, soc electric sau accidentari.
- ☐ Supravegherea este necesara atunci cand folositi aparatul in preajma copiilor sau persoanelor cu dizabilitati mentale sau fizice.
- ☐ Folositi produsul doar in scopul pentru care a fost conceput. Nu modificati produsul in nici un fel!
- ☐ Nu folositi produsul daca cablul de alimentare este deteriorat. Daca produsul este deteriorat, contactati furnizorul.
- ☐ Nu trageți de cablul de alimentare.
- ☐ Feriti cablul de alimentare de sursele de caldura.
- ☐ Lasati spatiul pentru ventilatie, liber.
- ☐ Nu scapati obiecte in spatiul de ventilatie.
- ☐ Nu folositi aparatul in mediul exterior.
- ☐ Opriti toate functiile aparatului, apoi scoateti stecherul din priza.
- ☐ Nu folositi functia pentru caldura, daca aveti sensibilitate la caldura. Feriti aparatul de copii si persoane cu abilitati mentale/ fizice reduse.
- ☐ Folositi aparatul doar in pozitia sezand.
- ☐ Nu folositi aparatul mai mult de o ora. Va recomandam sa folositi produsul in intervale 20 minute.
- ☐ Persoanele care sufera de: boli ale pielii severe sau cronice, boli ale inimii, rani, febra, femei insarcinate, boli psihice, infarct nu trebuie sa foloseasca acest produs.
- ☐ Nu folositi produsul daca sunteti sub influenta drogurilor sau alcoolului.
- ☐ Nu utilizati aparatul cu o ora inainte de masa si o ora dupa masa.
- ☐ Pentru curatarea produsului folositi o carpa umeda. Nu folositi apa sau alcool pentru curatarea produsului.
- ☐ Nu reparati si nu modificati produsul.
- ☐ Nu va asezati si nu stati in picioare pe aparat.
- ☐ Pentru a elimina iritatiile pielii, purtati sosete in timpul masajului.
- ☐ Nu scapati pe jos produsul.

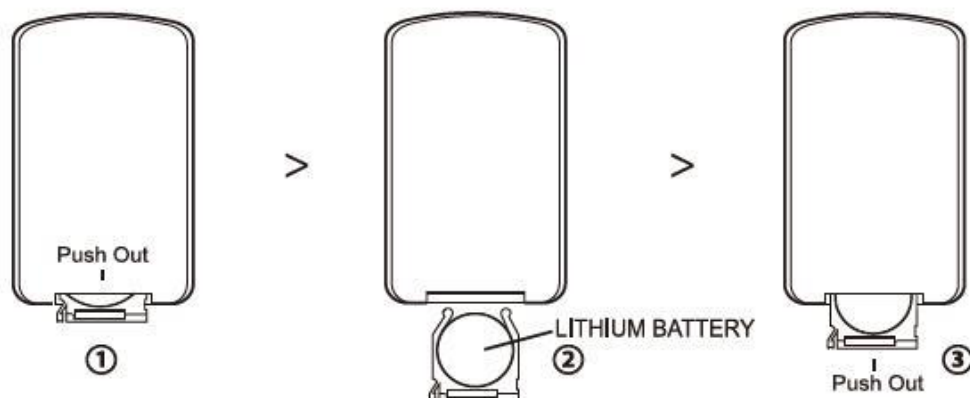
## UTILIZARE

- ☐ Introduceti stecherul in priza.
- ☐ Ecranul va afisa OF ceea ce inseamna ca aparatul este pregatit si se afla in modul de asteptare. Incepeti masajul prin apasarea butonului ON/OFF. Ecranul va afisa OO. Aparatul va incepe sa vibreze la nivelul 1.

- ☐ Ajustati viteza prin apasarea butoanelor + si – . Aparatul are 15 niveluri de vibratii. Ecranul va afisa caloriile, dupa ce ati setat viteza.
- ☐ Pentru a activa functia de incalzire, apasati butonul de infrarosu. Caldura poate fi pornita separat.
- ☐ Temporizatorul poate fi setat la 10, 20, 30 minute. Masajul se va opri automat dupa scurgerea timpului selectat .
- ☐ Pentru masaje presetate, apasati butonul SELECT. Apasati butoanele + si – pentru a va intoarce la modul manual.
- ☐ 4 moduri presetate:
  - Mod Vitalitate
  - Mod Relaxare
  - Mod Reflexologie
  - Mod Slabire
- ☐ Cand folositi masajul presetat, puteti selecta timpul.
- ☐ Numaratoarea caloriilor va fi afisata dupa cateva secunde.
- ☐ Masajul va incepe la nivelul 1, dupa aceea puteti seta dvs. nivelul dorit. Nu folositi aparatul mai mult de 30 minute.
- ☐ Dupa utilizare, scoateti stecherul din priza.

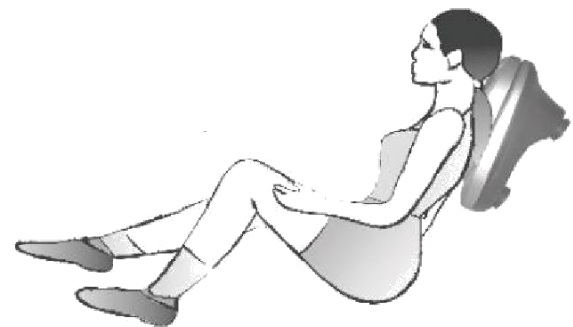
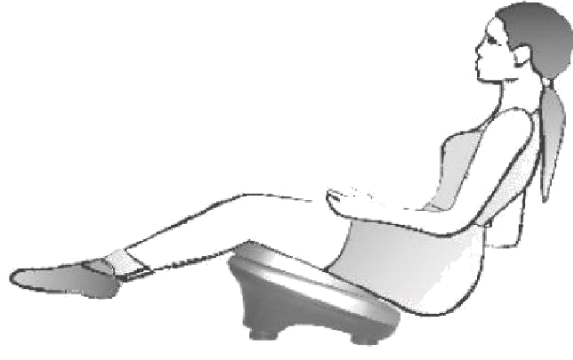
## INLOCUIRE BATERII

- ☐ Bateriile sunt localizate in spatele telecomenzii wireless.
- ☐ Apasati clama si trageți afara sertarul in care se afla bateria. Inlocuiti-o si impingeti la loc sertarul.
- ☐ Folositi baterii “LITHIUM” CR2025.



## UTILIZARE ALTERNATIVA

Aparatul poate fi folosit si pe alte parti ale corpului. Vibratiile ajuta la relaxarea muschilor si la ameliorarea incordarii, atunci cand se foloseste pentru gambe, coapse, spate sau talie. Poate fi folosit regulat, pe zonele abdomenului si coapselor.

|                                                                                    |                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>Asezati-va picioarele pe centrul zonei de presiune.</p>                                                                                                        |
|   | <p>Sprijiniti-va partea superioara a spatelui si umerii pentru a reduce durerea resimtita la nivelul gatului, bratelor, umerilor.</p>                             |
|  | <p>Asezati-va confortabil si plasati aparatul astfel incat zona de presiune centrala a aparatului sa fie plasata sub coapsele dvs. (Purtati pantaloni lungi).</p> |